

EVA portaali kasutusjuhend lõppkasutajatele

Kehtib: Solidsoft Reply EtMVS-i 15.
Versioon: 11.0


Sihtrühm: apteegid, hulgimüüjad ja haiglad
PAKENDITE MANUAALNE KONTROLLIMINE

Erakorralise kontrolli rakendus (EVA)

PAKENDITE MANUAALNE KONTORLLIMINE

EVA – mis on EVA ja kuidas seda kasutada?

- Erakorralise kontrolli rakendus (EVA) aitab tagada süsteemi talitluspidevust kliendisüsteemi rikke korral. Sellele pääseb juurde igast arvutist, millega on ühendatud klaviatuur ning mis võimaldab kasutada veebibrauserit ja internetti.
- EVA-le pääseb juurde iga riigi jaoks kordumatu veebi-URL-i kaudu.
- EVA-t saab kasutada ravimipakendite kontrollimiseks ja kasutuselt kõrvaldamiseks. See ei toeta skannerit ega ole ette nähtud kasutamiseks integreeritud kliendisüsteemi püsiva asendajana.
- See ravimipakendite kontrollimise meetod on mõeldud kasutamiseks siis, kui elektroonilise müügikoha seadmed (näiteks kassa) pole apteegis või hulgimüüja juures parajasti saadaval.
- Üksikisikutel, kes soovivad seda rakendust kasutada, peab riiklikus süsteemis olemas olema juba kinnitatud kasutajakonto, mis on seadistatud EtMVS-i haldusportaali kaudu. Kasutajad peavad olema registreerimisprotsessi edukalt läbinud.
- EVA-ga kaasnevad valikud sõltuvad kasutaja tüübist. Apteegist kasutajatele ja hulgimüüjast kasutajatele pakutakse erinevaid valikuid.
 - Apteekrid** saavad pakendeid kasutuselt kõrvaldada järgmises vormis: *hävitatud, näidis ja tarnitud*.
 - Hulgimüüjad** saavad pakendeid kasutuselt kõrvaldada järgmises vormis: *hävitatud, näidis, tarnitud, lukustatud, eksporditud ja varastatud*.
- Märkus.** Pakendi taasaktiveerimine EVA kaudu ei ole lubatud, samuti pole lubatud toodet kasutuselt kõrvaldada tasuta näidisena, mis ei ole sama kasutuselt kõrvaldamise vorm, nagu eespool nimetatud näidis.

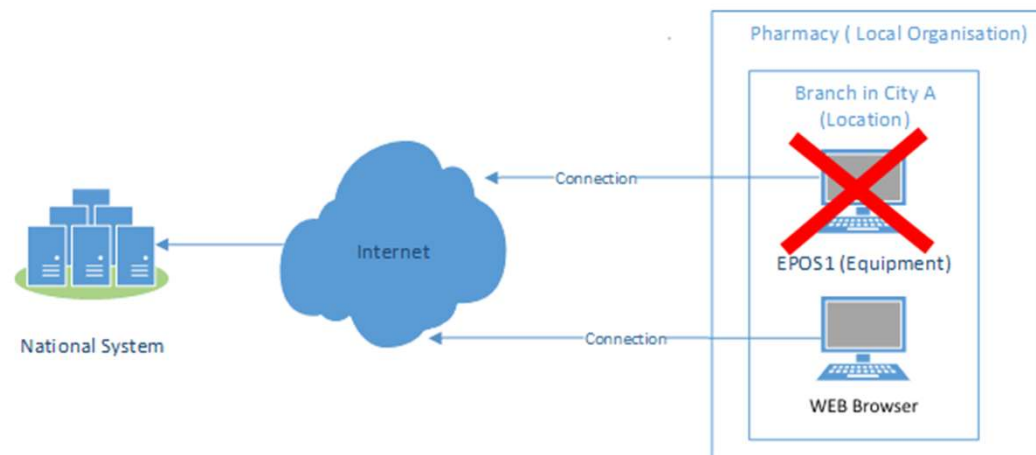

EVA kliendi nõuded


- Riistvara: klaviatuuri ja hiire ühendamise võimalus; värviline ekraan, mille eraldusvõime on vähemalt 1280 × 600.
- Operatsioonisüsteem (OS): mis tahes OS, mida Microsoft parajasti toetab.
- Brauser: mis tahes brauser, mida Microsoft, Google või Mozilla parajasti toetab. Vajalik on JavaScript.
- Võrk: piiramatult juurdepääs TCP-võrgupordile.
- Internetiühendus: jah

EVA – portaali URL-id

Igal riiklikul ravimite ehtsuse kontrolli organisatsioonil on oma EVA, millele pääseb juurde kordumatu URL-i kaudu.

Bulgaaria: <https://eva-bg.nmvo.eu>
Horvaatia: <https://eva-hr.nmvo.eu>
Küpros: <https://eva-cy.nmvo.eu>
Tšehhi Vabariik: <https://eva-cz.nmvo.eu>
Taani: <https://eva-dk.nmvo.eu>
Island: <https://eva-is.nmvo.eu>
Soome: <https://eva-fi.nmvo.eu>
Iirimaa: <https://eva-ie.nmvo.eu>
Leedu: <https://eva-lt.nmvo.eu>
Malta: <https://eva-mt.nmvo.eu>
Sloveenia: <https://eva-si.nmvo.eu>
Rootsi: <https://eva-se.nmvo.eu>
Šveits: <https://eva-ch.nmvo.eu>

Valitud EVA kasutamiseks avage sobiv veebibrauser ja sisestage enda riigi URL aadressiväljale, seejärel klõpsake klaviatuuril enter-klahvi.

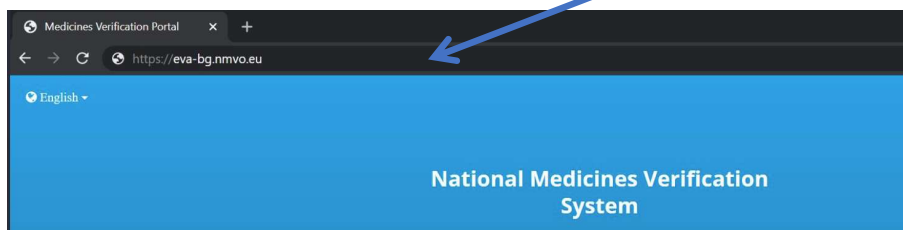

EVA – portaali sisselogimine

National Medicines Verification System

Authorised Users Only

User Name

Password

Sign In

If you have forgotten your User Name, please contact a User Administrator in your Organisation.

If you have forgotten your password, please use the following link and carefully follow the instructions: [Password Reset](#)

1. Sisestage sisselogimisaknas oma kasutajanimi ja parool (kasutajanimi on meiliaadress).
2. Klõikige „Sign In“ („Logi sisse“).
3. Valige ripploendist oma praegune füüsiline asukoht. See loend koostatakse haldusportaali kaudu edastatud asukohaandmete põhjal. Kasutaja peab olema asukohaga seotud, kuna kõigi kasutuselt kõrvaldatavate pakenditega peab olema seotud kasutuselt kõrvaldamise asukoht.
4. Kui kasutajale on vaikeasukoht juba määratud, ei paluta tal enam asukohta valida.
5. Klõikige uuesti „Sign In“ („Logi sisse“).

National Medicines Verification System

Authorised Users Only

User Name

Password

Location

Sign In

If you have forgotten your User Name, please contact a User Administrator in your Organisation.

If you have forgotten your password, please use the following link and carefully follow the instructions: [Password Reset](#)


EVA – avaleht

Avaleht kuvatakse pärast rakendusse sisselogimist. Sellele lehele saate igal ajal tagasi pöörduda, valides menüüst „Home“ („Avaleht“).

Parooli muutmise vahelehel saab muuta aktiivsete kasutajate parooli.

EVA-st väljumiseks tuleb end rakendusest välja logida.

Pakendi üksikasjade jaotises tuleb ravimi andmed sisestada klaviatuuri abil. Andmed tuleb sisestada täpselt nii, nagu need on esitatud pakendil.

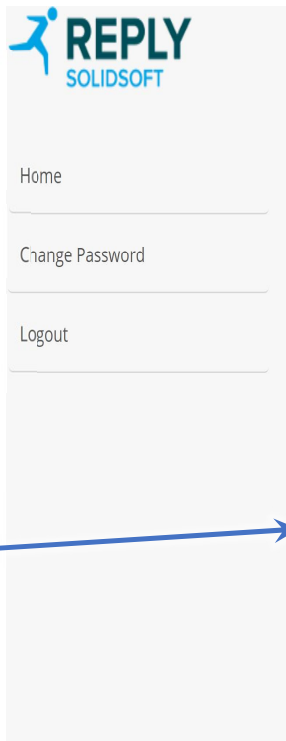

Home

Emergency Verification Application

Insert pack details

* Product Code Scheme

GTIN

* Product Code

* Serial Number

* Batch Number

Batch Expiry Date

Day

Month

Year

Next

Valige rippmenüüst „GTIN“ või „PPN“.

Pakendil olev teave

Kui kogu vajalik pakendil olev teave on sisestatud, klõppige nuppu „Next“ („Järgmine“).

EVA – pakendi toimingud – apteek – kontrollimise õnnestumine

Avalehel sisestatud pakendi üksikasjad kuvatakse uuesti pakendi üksikasjade jaotises.

1. Pakendi üksikasjade kontrollimiseks klõikige nuppu „Verify“ („Kontrolli“). Pakendi teavet kontrollitakse riikliku süsteemi alusel.

The verify operation has been executed successfully. x

Choose Pack Operation

Product Code Scheme	GTIN
Product Code	21010430142174
Serial Number	sn1
Batch Number	batch3
Batch Expiry Date	261018

Result

Operation Code	11110100
Information	The pack is available to be dispensed.
State	Active

Pack Operations

VerifyDestroyedSampleSupplied

2. Kontrolli tulemused kuvatakse valiku „Verify“ („Kontrolli“) kohal ja ekraani ülaosas.
3. Pärast kontrollimise õnnestumist saab pakendi määrata hävitatuks, deaktiveerituks (tarnitud/müüdnud) või näidiseks, kasutades selleks suvandinuppe.

EVA – pakendi toimingud – apteek – kontrollimise ebaõnnestumine

Avalehel sisestatud pakendi üksikasjad kuvatakse uuesti pakendi üksikasjade jaotises.

1. Pakendi üksikasjade kontrollimiseks klõpsake nuppu „Verify“ („Kontrolli“). Pakendi teavet kontrollitakse riikliku süsteemi alusel.

Home > Pack Operation

Emergency Verification Application

The verify operation has failed.

Choose Pack Operation

Product Code Scheme	PPN
Product Code	012119200922
Serial Number	112233445566206565
Batch Number	DBOP
Batch Expiry Date	220810

Result

Operation Code	41020003
Warning	The batch identifier mismatches the recorded batch identifier. An alert has been raised.
Alert Id	XX-KST-1PH-9W9-W22-3JB

Pack Operations

Verify

Destroyed

Sample

Supplied

2. Kontrolli tulemused kuvatakse valiku „Verify“ („Kontrolli“) kohal ja ekraani ülaosas.

EVA – pakendi toimingud – hulгимүүжа – kontrollimise õnnestumine

Avalehel sisestatud pakendi üksikasjad kuvatakse uuesti pakendi üksikasjade jaotises.

1. Pakendi üksikasjade kontrollimiseks klõpsake nuppu „Verify“ („Kontrolli“). Pakendi teavet kontrollitakse riikliku süsteemi alusel.

The verify operation has been executed successfully. x

Choose Pack Operation

Product Code Scheme	GTIN
Product Code	21010430142174
Serial Number	sn1
Batch Number	batch3
Batch Expiry Date	261018

Result

Operation Code	11110100
Information	The pack is available to be dispensed.
State	Active

Pack Operations

Verify	Destroyed	Exported	Locked
Sample	Stolen	Supplied	

2. Kontrolli tulemused kuvatakse valiku „Verify“ („Kontrolli“) kohal ja ekraani ülaosas.

3. Pärast kontrollimise õnnestumist saab pakendi määrata hävitatuks, ekspordituks, lukustatuks, näidiseks, varastatuks või deaktiveerituks (müüdnud/tarnitud), kasutades selleks suvandinuppe.

EVA – parooli muutmine

Parooli muutmise vahelehte saab kasutada administreerimisportaali kaudu registreeritud aktiivsete kasutajate parooli muutmiseks.

1. Sisestage uut parooli vajava kasutajakontoga seotud e-posti aadress.
2. Sisestage parool, mida soovite muuta.
3. Sisestage ja kinnitage uus parool.
4. Klõkkige nuppu „Confirm“ („Kinnita“).

Emergency Verification Application

Change Password

* Email

* Old Password

* New Password

* Confirm Password

Confirm